



Kullanım Kılavuzu

Prof. Valmed®

Uyarı:

Tıbbi cihazı doğru kullanmak için bu kullanım kılavuzunu okuyun ve uygulayın.
To use the medical device correctly, read and follow these instructions for use.

Bankverbindung

Sparkasse Langen-Seligenstadt
IBAN: DE21 5065 2124 0026 1473 55
BIC: HELADEF1SLS

Handelsregister

Amtsgericht Offenbach am Main HRB 56033
USt-IdNr. DE362778887
St.-Nr. 044 241 36198

Geschäftsführerin

Dr. Vera Rödel

Değerli müşterilerimiz,

Prof. Valmed®'i satın aldığınız için teşekkür ederiz. Seçiminiz, daha iyi tıbbi kararlar ve daha verimli sağlık hizmetleri yolunda atılmış kararlı bir adımdır.

Prof. Valmed®, yenilikçi yapay zeka tabanlı teknolojiler aracılığıyla doktorlara ve sağlık profesyonellerine doğrulanmış tıbbi bilgiler sağlama amacına hizmet etmektedir. Prof. Valmed® ile zamandan tasarruf sağlarken teşhis ve tedaviyi iyileştirmeyi amaçlayan ve nihayetinde sağlık sektörünün dijitalleşmesine önemli bir katkı sağlayan bir platform sunuyoruz.

UYARI! Yanlış kullanım ve hatalı uygulama tehlikeye ve hasara yol açabilir. Bu nedenle bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanızı ve talimatlara tam olarak uymanızı rica ediyoruz. Olası kişisel yaralanmaları ve maddi hasarları önlemek için kılavuzu daima elinizin altında bulundurun. Bu kullanım kılavuzunun içeriği veya ürünün kullanımı hakkında herhangi bir sorunuz olursa, lütfen profvalmed@profvalmed.com adresinden bizimle iletişime geçin.

Prof. Valmed® Ekibinden Saygılarla.



İçindekiler Tablosu

1	BU KULLANIM KILAVUZUNUN KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER.....	0
1.1	BU KULLANIM KILAVUZUNDAKİ UYARILARIN AÇIKLAMASI.....	0
1.2	TIPOGRAFİK KURALLAR.....	0
1.3	KISALTMALAR VE TERİMLER.....	0
1.4	OLAYLARI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ.....	0
2	KULLANIM VE GÜVENLİKLE İLGİLİ BİLGİLER.....	0
2.1	KULLANIM AMACI.....	0
2.2	KLINİK FAYDA.....	0
2.3	ENDİKASYONLAR.....	0
2.4	KONTRENDİKASYONLAR.....	0
2.5	HEDEFLenen KULLANICILAR.....	0
2.6	SINIFLANDIRMA.....	0
2.7	GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI.....	0
2.8	KISITLAMALAR.....	0
2.9	SORUMLULUK REDDİ.....	0
3	ÜRÜN AÇIKLAMASI.....	0
4	SİSTEM GEREKSİNİMLERİ.....	0
5	KAYIT.....	0
5.1	KULLANICI KAYDI.....	0
5.2	İLK KEZ GİRİŞ YAPMA.....	0
6	OPERASYON.....	0
6.1	GİRİŞ YAPMA VE ÇIKIŞ YAPMA.....	0
6.2	ANA SAYFA.....	0
6.3	SORGU YÜRÜTME – İSTEM (PROMPT).....	0
6.3.1.	PROMPT (İSTEM).....	0
6.3.2.	İSTEM İÇİN SORGU TASARLAMA HAKKINDA BİLGİ.....	0
6.3.3.	SİSTEM YANITLARI HAKKINDA GERİ BİLDİRİM SAĞLAMA.....	0
6.3.4.	YENİ BİR SORGU BAŞLATMA - NEW TOPIC.....	0
6.3.5.	YANITI KOPYALA.....	0
6.3.6.	BELGELERİ SEÇ.....	0
6.4	FİLTRE İŞLEVLERİNİN AYARLANMASI.....	0
6.4.1.	VARSAYILAN AYARLAR.....	0
6.4.2.	FİLTRELERİN AYARLANMASI.....	0
6.5	SORGU GEÇMİŞİ - HISTORY.....	0
6.5.1.	GEÇMİŞ KAYITLARINI SILME.....	0
6.6	HESAP AYARLARI.....	0
6.7	ETİKET (LABEL).....	0



6.7.1.	ETİKET ÜZERİNDEKİ SEMBOLLER.....	0
6.8	VERİ TABANI DEĞİŞİKLİKLERİNE GENEL BAKIŞ.....	0
7	<u>SORUN GIDERME.....</u>	0
7.1	HATA EKRANI VE ÇÖZÜM.....	0
7.2	PROF. VALMED® HESABINA GİRİŞ YAPARKEN YAŞANAN SORUNLAR.....	0
8	<u>BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GÜVENLİĞİ.....</u>	0
9	<u>BAKIM.....</u>	0
9.1	PROF. VALMED®'İN BAKIMI.....	0
9.2	PROF. VALMED® VERİ TABANI GÜNCELLEMELERİ.....	0

1 Bu kullanım kılavuzunun kullanımına ilişkin bilgiler

Kişisel yaralanmaları önlemek için, listelenen tüm güvenlik talimatlarına uyun.

Tıbbi cihazı doğru kullanmak için bu kullanım kılavuzunu okuyun ve uygulayın.

1.1 Bu kullanım kılavuzundaki uyarıların açıklaması

Prof. Valmed®'in kullanımına ilişkin güvenlik talimatlarını belirtmek için, bu kullanım kılavuzunda (KK) aşağıdaki uyarı kelimeleri kullanılabilir:

Uyarı Kelimesi	Açıklama
UYARI	Ciddi hasarla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir duruma ilişkin önemli bilgi
DİKKAT	Hafif veya orta dereceli hasarla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir duruma ilişkin önemli bilgi
NOT	Tıbbi cihazı çalıştırırken zorluklardan kaçınmak için ek bilgi.

1.2 Tipografik kurallar

Bu kullanım kılavuzunda, kullanıcıyla ilgili sistem özelliklerini vurgulamak için özel metin biçimlendirmesi kullanılmıştır.

Tipografi	Açıklama
<i>İtalik</i>	İtalik kelimeler, ekran alanları gibi sistem bileşenlerini temsil eder. Bunlar kullanıcının görebileceği ancak doğrudan etkileşime giremeyeceği unsurlardır.
<i>İtalik ve Kalın</i>	İtalik ve kalın metin, düğmeler veya seçim işlevleri gibi etkileşimli öğeleri temsil eder. Bunlar, kullanıcının sistem içinde eylemler gerçekleştirmek için etkileşime girebileceği unsurlardır.

1.3 Kısaltmalar ve terimler

YZ: yapay zeka

İstem (Prompt): Yapay zeka (AI) alanında "prompt" terimi, istenen bir yanıtı veya çıktıyı elde etmek için bir AI modeline verilen kısa talimatları veya metin parçalarını tanımlar. İstemler, modelden belirli bilgileri üretmesini veya anlamasını isteyen görevler gibidir.

Sorgu (Query): Query, belirli tıbbi bilgileri elde etmek için Prof. Valmed®'in Prompt işlevine girilen bir arama terimi veya sorudur. Sorgular, klinik karar vermeyi desteklemek için teşhislere, tedavi önerilerine ve tıbbi kılavuzlara erişim sağlar.

KK: Kullanım kılavuzu

Kullanıcılar (Users): Prof. Valmed®'in doğrulanmış tıbbi bilgiler sağlayarak desteklediği tüm kullanıcıları tanımlar. Bkz. Bölüm 2.5 Hedeflenen kullanıcılar.

Prof. Valmed®: Prof. Valmed® - validated medical information GmbH şirketinin kısaltmasıdır.

1.4 Olayları bildirme yükümlülüğü

Bu ürünle ilgili ciddi olaylar, üreticiye ve kullanıcının yerleşik olduğu Üye Devletin yetkili makamlarına bildirilmelidir. Prof. Valmed®'i içeren olaylarla ilgili belirsizlikler durumunda, lütfen üreticiyle iletişime geçin.

Üretici iletişim adresi: profvalmed@profvalmed.com

Üye Devletlerin yetkili makamları: https://health.ec.europa.eu/medical-devices-sector/new-regulations/contacts_en

2 Kullanım ve güvenlikle ilgili bilgiler

2.1 Kullanım amacı

Prof. Valmed® yazılımı, doğal dildeki soruları ve girdileri işleyerek doğal dilde yanıtlar üretir. Doktorlara ve tıbbi personele insan hastalıklarının teşhisi, tedavisi veya izlenmesi için öneriler sunmak üzere tasarlanmıştır.

2.2 Klinik fayda

Prof. Valmed; halüsinasyonların oluşumunu önemli ölçüde en aza indirirken, derlenmiş, yüksek kaliteli ve doğrulanmış tıbbi verilere dayalı olarak, hastalıkların teşhisi ve tedavisine ilişkin kullanıcının özel sorusuna göre uyarlanmış bilgiler sağlar.

2.3 Endikasyonlar

Prof. Valmed® sağlık profesyonellerini çeşitli alanlarda desteklemek için tasarlanmıştır:

- Teşhisle ilgili konular: Prof. Valmed®, çok çeşitli tıbbi durumların teşhisine yardımcı olmak için doğrulanmış, kanıta dayalı bilgiler sağlayarak sağlık profesyonellerini destekler.
- Tedavi kararları: Prof. Valmed®, ilaç etkileşimleri, tedavi protokolleri ve en son kılavuzlara dayanan terapötik alternatifler dahil olmak üzere sağlık hizmeti sağlayıcılarının bilinçli terapötik seçimler yapmasına yardımcı olarak tedavi seçenekleri hakkında veri destekli rehberlik sağlar.

2.4 Kontrendikasyonlar

Prof. Valmed® kullanılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- Diş hekimliğindeki sorular için uygun değildir
- Veteriner hekimliğindeki sorular için uygun değildir
- Tıbbi olmayan konular için kullanılmamalıdır

2.5 Hedeflenen kullanıcılar

Prof. Valmed® sadece tıp eğitimi almış kişiler tarafından kullanılabilir. Kullanıcılar, sağlanan bilgileri doğru bir şekilde yorumlamak ve uygulamak için gerekli uzmanlık bilgisine ve niteliklere sahip olmalıdır.

Prof. Valmed® ürününün hedeflenen kullanıcıları şunları içerir:

1. Sağlık profesyonelleri: Hastalıkların ve yaralanmaların teşhisi, tedavisi ve izlenmesinde yer alan doktorlar, klinisyenler, hemşireler, tıbbi asistanlar, eczacılar ve diğer sağlık profesyonelleri.
2. Sağlık otoriteleri ve düzenleyici kurumlar: Sağlık otoriteleri ve düzenleyici kurumlar; tıbbi yenilikleri değerlendirmek, ürün kalitesini izlemek ve kılavuzlar ile düzenlemeler geliştirmek için ürünü kullanabilirler.
3. Eğitim kurumları: Tıp eğitimi veren kurumlardaki öğretmenler ve öğrenciler; eğitimlerini desteklemek, araştırma projeleri yürütmek ve yapay zeka tabanlı tıbbi araçları kullanma konusunda pratik deneyim kazanmak için ürünü kullanabilirler.

Tüm kullanıcı grupları bundan böyle "kullanıcılar" olarak anılacaktır.

2.6 Sınıflandırma

(EU) 2017/745 sayılı Yönetmelik (MDR), Ek VIII'e göre sınıflandırma: Sınıf IIb

2.7 Genel güvenlik talimatları

Ürünün bu kullanım kılavuzunda belirtilen bilgilere aykırı kullanılması halinde kişisel yaralanmalar meydana gelebilir. Ürünü yalnızca "Kullanım amacı" altında belirtilen amaç için kullanın. Bu kullanım kılavuzunu okuyun ve talimatlara uyun.

Tıbbi cihazın genel kullanımı için aşağıdaki güvenlik talimatları geçerlidir:

NOT

Prof. Valmed® yapay zeka (YZ) içerir.

NOT

Prof. Valmed®'in yanıtları sınırlı sayıda tıbbi kılavuza dayanmaktadır. Prosedürlerde ve önerilerde farklı yetki alanlarında (yargı bölgelerinde) farklılıklar olabilir. Gerekirse filtreleri buna göre ayarlayın.

UYARI

Prof. Valmed® tarafından sağlanan bilgiler tıbbi konularda karar vermeyi desteklemeyi amaçlamaktadır ve teşhis veya tedavi kararları için tek dayanak olması amaçlanmamıştır. Hastayı riske atabilir.

UYARI

Prof. Valmed® yalnızca sağlık profesyonelleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

2.8 Kısıtlamalar

Prof. Valmed® yazılımı için bilinen kısıtlamalar şunlardır:

- Prof. Valmed® tarafından sağlanan bilgiler tıbbi konularda karar vermeyi desteklemeyi amaçlamaktadır ve teşhis veya tedavi kararları için tek dayanak olması amaçlanmamıştır.
- Prof. Valmed®'in yanıtları sınırlı sayıda tıbbi kılavuza dayanmaktadır.

2.9 Sorumluluk Reddi

Prof. Valmed®'in amacı, doğrulanmış tıbbi bilgileri sağlık profesyonelleri için pratik ve değerli bir şekilde kolayca ulaşılabilir kılmaktır.

Prof. Valmed® doğal dildeki soruları ve girdileri işler, doğal dilde yanıtlar üretir ve doktorlara ile tıbbi personele insan hastalıklarının teşhisi, tedavisi veya izlenmesi için öneriler sunar.

Prof. Valmed® teşhis ve tedavi karar alma süreçlerini desteklemek için ilgili tıbbi literatürü ve kılavuzları analiz edip değerlendirerek tıp biliminin mevcut durumunu yansıtır. Bu nedenle, burada sunulan bilgiler hiçbir koşulda nitelikli ve tanınmış tıp uzmanları tarafından verilen profesyonel tavsiye veya tedavinin yerine geçecek şekilde değerlendirilmemelidir.

Bilgi tabanı: Prof. Valmed®'in bilgi tabanını oluşturan ilgili tıbbi literatür ve kılavuzlar tamamen halka açıktır. Prof. Valmed® bilgi tabanının olgusal doğruluğunu teyit etmemiştir. Bu nedenle Prof. Valmed®, bir kullanıcının girdisine yanıt olarak Prof. Valmed® tarafından sağlanan çıktının doğruluğu veya burada yer alan bilgilerin kullanımı konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Sınırlı bilgi: Prof. Valmed® tarafından üretilen içerik yapay zeka tabanlıdır. Lütfen Prof. Valmed®'in en güncel olmayı amaçladığını ve tıbbi bilgileri düzenli olarak güncellediğini, ancak her türlü bilginin mutlak eksiksizliğini, doğruluğunu ve güncelliğini iddia edemeyeceğini unutmayın.

Kişisel bilgiler ve olumsuz olaylar: Lütfen Prof. Valmed® kullanırken yalnızca tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiyle ilgili bilgileri (kişisel bilgiler), uygun bir yasal dayanak (ör. GDPR Madde

6 veya Madde 9) bulunması ve tüm veri koruma gerekliliklerinin karşılanması koşuluyla girdi olarak kullanmanız gerektiğini unutmayın. Prof. Valmed® olumsuz olayların bildirilmesi amacıyla kullanılmamalıdır.

3 Ürün açıklaması

Prof. Valmed®, sağlık profesyonellerini teşhis ve tedavi planlamasında desteklemek üzere tasarlanmış bir yazılım çözümüdür. Prof. Valmed®, doğal dil girdisini işlemek ve kullanıcı sorgularına ilgili tıbbi bilgileri sağlamak için yapay zeka kullanır. Sistem çıktısı, Prof. Valmed GmbH tarafından insan gözetiminde seçilen ve derlenen doğrulanmış tıbbi verileri içeren Prof. Valmed® veri tabanına dayanmaktadır. Kullanıcı, Prof. Valmed® ile tarayıcı tabanlı bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla etkileşime girer. Kullanıcı arayüzünün düzeni ve kullanıcının sistemle etkileşimi Bölüm 6 Kullanım içerisinde açıklanmıştır.

4 Sistem gereksinimleri

Prof. Valmed® tarayıcı tabanlıdır. Kullanım için, güncel bir tarayıcı sürümünün yüklü olduğu internet erişimli bir cihaz (masaüstü bilgisayar, tablet, akıllı telefon) gereklidir. Desteklenen tarayıcılar aşağıdaki sürümlerdir:

- Chrome (Sürüm: 125.0.xx... ve daha yenisi)
- Firefox (Sürüm: 124.xx... ve daha yenisi)
- Edge (Sürüm: 123.x.x... ve daha yenisi)
- Safari (Sürüm: 17.0 ve daha yenisi)

NOT

Prof. Valmed® Safari üzerinden kullanıldığında, kullanıcı arayüzünün grafik unsurları doğru görüntülenmeyebilir. Bu durum sistemin işlevselliğini etkilemez.

Sistem tarayıcı tabanlı olduğundan, Prof. Valmed® kullanılan uç cihazın işletim sisteminden bağımsızdır. Windows ve Apple OS işletim sistemleriyle uyumluluğu test edilmiştir.

5 Kayıt

5.1 Kullanıcı kaydı

Prof. Valmed®'e erişim, bireysel erişim olarak veya bir şirket erişimi aracılığıyla sağlanabilir.

Prof. Valmed®'e bir şirket hesabı üzerinden erişimi olan kullanıcı grupları, Microsoft Entra ID grupları aracılığıyla Prof. Valmed için yetkilendirilir. Microsoft Entra ID grupları, kullanıcı gruplarının uygulamalara, bu durumda Prof. Valmed®'e, erişim yönetimine olanak tanır. Şirkete özel erişim mekanizması, şirketin kendi Bilgi Teknolojileri yönetimi tarafından yönetilir.

Prof. Valmed®'e bireysel erişim yoluyla erişen kullanıcılar için erişim, Prof. Valmed GmbH tarafından atanır. Kayıt işlemi geçerli bir e-posta adresi gerektirir. Bu e-posta adresi, kullanıcı için benzersiz bir tanımlayıcı olarak kullanılır. Kayıt için profvalmed@profvalmed.com adresi ile iletişime geçin. Prof. Valmed® tarafından kayıt işlemi gerçekleştirildikten sonra, kullanıcı(lar) daha fazla erişim bilgisi içeren bir e-posta alacaktır.

5.2 İlk kez giriş yapma

Bireysel erişim: Prof. Valmed®'e bireysel erişim yoluyla erişen kullanıcılar, başarılı bir kayıt işleminden sonra erişim bilgilerini içeren bir e-posta alırlar. Prof. Valmed®'e ilk kez erişmek için bu e-postada sağlanan bilgileri izleyin. İlk kez giriş yapıldığında kullanım koşulları görüntülenir ve bu koşullar kullanıcı tarafından onaylanmalıdır.

Kullanıcının sağlanan e-posta adresiyle ilişkili bir Microsoft hesabı olmaması durumunda, kullanıcı Microsoft hesabı için kayıt sayfasına yönlendirilecektir. Microsoft hesabını oluşturmak için Microsoft'un talimatlarını izleyin. Ardından Prof. Valmed®'e dönün ve Microsoft hesabı giriş bilgileriyle giriş yapın.

Şirket erişimi: Şirket erişimine sahip kullanıcı grupları, şirket kimlik bilgilerini kullanmaya devam ederler. İlk kez giriş yapıldığında kullanım koşulları görüntülenir ve bu koşullar kullanıcı tarafından onaylanmalıdır.

6 Operasyon

UYARI

Prof. Valmed® tarafından sağlanan bilgiler tıbbi konularda karar vermeyi desteklemeyi amaçlamaktadır ve teşhis veya tedavi kararları için tek dayanak olması amaçlanmamıştır. Hastayı riske atabilir.

6.1 Giriş yapma ve çıkış yapma

Prof. Valmed®'de oturum açmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Bu kullanım kılavuzunda listelenen bir tarayıcı aracılığıyla (bkz. Bölüm 4 Sistem gereksinimleri) <https://app.profvalmed.com> bağlantısından web uygulamasını açın.
2. Erişim türüne bağlı olarak aşağıdaki adımları izleyin:

Şirket erişimi:

- a) Prof. Valmed®'e bir şirket hesabı üzerinden erişen kullanıcı grupları doğrudan giriş yapar ve Prof. Valmed®'in ana sayfası görüntülenir.

Bireysel erişim:

- a) Prof. Valmed®'e erişim için Microsoft oturum açma penceresi görünür
- b) İlgili alana e-posta adresinizi girin ve **next**'e tıklayın
- c) İlgili alana şifrenizi girin ve **next**'e tıklayın
- d) Girilen kişisel giriş bilgileri doğruysa, Prof. Valmed® ana sayfası görüntülenecektir.

Çıkış yapmak için (Şirket erişimi ve Bireysel erişim) aşağıdaki adımları izleyin:


1. Ana sayfada **Account**'a tıklayın.
2. Görüntülenen pencerede **Logout** seçeneğine tıklayın

Kullanıcının sistemden çıkışı yapılacaktır. Ardından web uygulaması kapatılabilir.

6.2 Ana sayfa

Ana sayfa, sorguları (**Prompt**) yürütmek için başlangıç noktasıdır. Aşağıdaki tablo, ana sayfanın bileşenlerini ve işlevlerini listelemektedir.

N o.	Başlık	Açıklama
A	Üst bilgi çubuğu	Sistem sürümünün gösterimidir ve sistemde gezinmek için çeşitli seçim düğmelerini (New Topic; Label, Information, Account) içerir
B	Filtre görünümü	Olası filtrelerin görüntülenmesi ve ayarlanması
C	Girdi alanı	Kullanıcı tarafından bir sorgu girilecek alan
D	Görüntüleme alanı	Kullanıcı sorgusuna sistemin verdiği yanıtın görüntülenmesi
E	Geçmiş görünümü	Hesabın sorgu geçmişinin görüntülenmesi

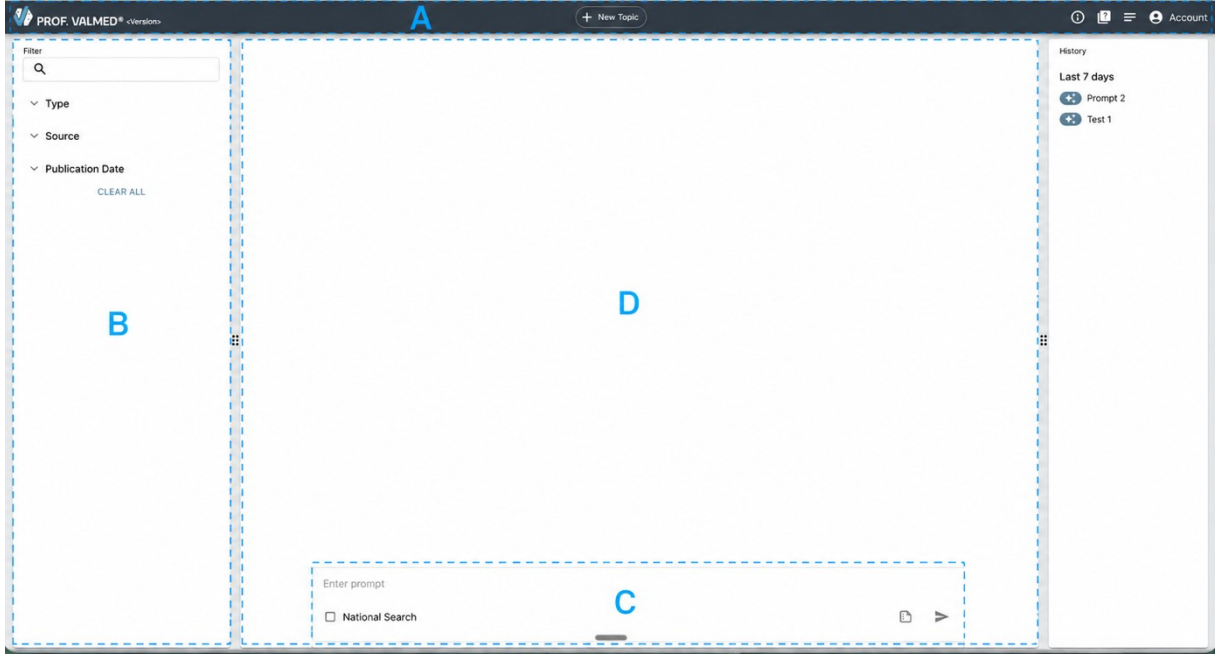


Şekil 1 Ana sayfa Prof. Valmed®

6.3 Sorgu yürütme – İstem (Prompt)

6.3.1. Prompt (İstem)

Kişisel Bilgiler ve Olumsuz Olaylar: Lütfen Prof. Valmed® kullanırken yalnızca tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiyle ilgili bilgileri (kişisel bilgiler), uygun bir yasal dayanak (ör. GDPR Madde 6 veya Madde 9) bulunması ve tüm veri koruma gerekliliklerinin karşılanması koşuluyla girdi olarak kullanmanız gerektiğini unutmayın. Prof. Valmed® olumsuz olayların bildirilmesi amacıyla kullanılmamalıdır.

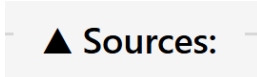

Şekil 2 Prof. Valmed® Source düğmesi

Prompt aracılığıyla bir sorgu yürütüldükten sonra, başka sorgular da yürütülebilir. Sistem, sonraki diyaloglarda önceki sorgulardan gelen bilgileri dahil eder. Kullanıcı tarafından bu istenmiyorsa, **New Topic** üzerinden yeni bir sohbet başlatılabilir.

NOT

Daha önce sorulan sorgularla ilgili sistem yanıtlarının bağımsızlığını sağlamak için **New Topic** üzerinden yeni bir sohbet başlatın.

NOT

Yanıtın kalitesi, sorunun formüle edilme şeklinden etkilenir. Bu kullanım kılavuzuna uygun olarak sorgu tasarlama hakkındaki bilgileri dikkate alın.

6.3.2. İstem için sorgu tasarlama hakkında bilgi

Bir İstem tasarlariken lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

Yapılması Gerekenler:

- Basit, standart tıbbi terminoloji kullanarak açık ve doğrudan sorular formüle edin.
- Belirgin olun ve gerekli bağlamı sağlayın
- Yaygın kısaltmalar kullanılabilir (sonuçlar tatmin edici değilse kısaltmalar olmadan tekrar deneyin)

Yapılmaması Gerekenler:

- Nadir görülen kısaltmalardan kaçının
- Çoklu veya bileşik sorulardan, kişisel tıbbi tavsiyelerden, argodan veya belirsiz terimlerden kaçının
- İstemlerin eksiksiz ve ayrıntılı olduğundan emin olun

Biçim:

- Basit cümle yapıları kullanın ve her sorguda bir kavrama odaklanın

NOT

Yanıtın kalitesi, sorunun formüle edilme şekline etkilendir. Bu kullanım kılavuzuna uygun olarak sorgu tasarlama hakkındaki bilgileri dikkate alın.

6.3.3. Sistem yanıtları hakkında geri bildirim sağlama

Prof. Valmed®, kullanıcıya alınan sistem yanıtları hakkında geri bildirim sağlama fırsatı verir. Bunun için kullanıcı bir sistem yanıtının sonunda şunları seçebilir:

- **Yıldız derecelendirmesi:** Verilen sistem yanıtını bir (düşük) ile dört (yüksek) yıldız arasında derecelendirmek için **yıldızlara** tıklayın. Seçilen yıldız sayısı vurgulanacaktır (sarı). Seçilen derecelendirme, kullanıcı tarafından daha fazla/daha az yıldıza tıklanarak değiştirilebilir
- **Serbest metin geri bildirimi:** **Konuşma balonu simgesine (speech bubble icon)** tıklanıldığında bir metin alanı genişler. Kullanıcı metin biçiminde (serbest metin alanı) geri bildirim sağlayabilir. Kullanıcı metin alanını daraltabilir/genişletebilir ve metnini değiştirebilir



Şekil 3 Prof. Valmed® konuşma balonu simgesi (speech bubble icon) (solda) ve yıldız derecelendirmesi (sağda)



Şekil 4 Vurgulanan yıldızlarla Prof. Valmed® yıldız derecelendirmesi (üç vurgulanmış yıldız)

^ ☆☆☆☆

Add any additional freeform comments here....

Şekil 5 Kullanıcı geri bildirimi için Prof. Valmed® genişletilebilir metin alanı (serbest metin alanı)

6.3.4. Yeni bir Sorgu Başlatma - New Topic

Üst bilgi çubuğundaki New Topic düğmesi yeni bir sorgu başlatmak için kullanılabilir.

NOT

New Topic üzerinden yeni bir sorgu başlatıldığında filtre ayarları sistem tarafından korunur. Filtre ayarları, sistem tarafından verilen yanıtı etkiler. Daha fazla kullanımdan önce filtre ayarlarını buna göre değiştirin.

6.3.5. Yanıtı Kopyala

Kullanıcı, **Prompt** modunu kullanırken sistem yanıtını kopyalayabilir. Sistem yanıtının sonundaki **Copy Answer** düğmesine tıklandığında, verilen sistem yanıtı diğer sistemlerde veya Microsoft Word gibi metin işleme yazılımlarında kullanmak üzere panoya kopyalanır.



Şekil 6 Copy Answer düğmesi

6.3.6. Belgeleri Seç

Kullanıcı, yalnızca **Prompt** modunda kullanıcı sorgularına yanıt verilirken dikkate alınacak bireysel belgeleri seçebilir.

Prompt modunu kullanırken, kullanıcı sorgu Giriş alanındaki **Select Documents** düğmesini seçebilir. **Select Documents** düğmesi seçildiğinde, kullanıcının **search bar** aracılığıyla belirli belgeleri arayabileceği ayrı bir pencere açılır.

search bar araba terimi girildiğinde, Prof. Valmed® veri tabanından ilgili belgeler listelenir. Kullanıcı, **scroll bar** ve **page navigation** aracılığıyla arama sonuçlarında gezinebilir. Bulunan sonuçların toplam sayısı pencerenin sol alt köşesinde görüntülenir.

Kullanıcı, belge adının yanındaki **check box** a tıklayarak belirli belgeleri seçebilir. Seçilen belgeler, belge listesinin üzerinde mavi metinle görüntülenecektir. Kullanıcı, yanındaki **"X"** işarete tıklayarak bir belgeyi bu seçimden çıkarabilir.

Kullanıcı şunlara tıklayabilir:

- Belge seçimini kaydetmeden pencereyi kapatmak için **CANCEL**, veya
- Pencereyi kapatıp belge seçimini kaydetmek için **OK**.

Pencere **OK** düğmesi ile kapatıldığında, **Select Documents** düğmesinin yanında seçilen belirli belgelerin sayısına karşılık gelen bir sayı görüntülenir.

Kullanıcı, seçimi ayarlamak için belge seçimi penceresine istediği zaman yeniden girebilir. Seçili filtreler (bkz. Bölüm 6.4 Filtre işlevlerinin ayarlanması)

6.4 Filtre işlevlerinin ayarlanması

6.4.1. Varsayılan ayarlar

Başarılı bir girişten sonra, varsayılan filtre ayarları seçilir. Varsayılan filtre ayarları şunlardır:

Filtre	Varsayılan ayar
Tür	Tüm seçenekler seçili
Kaynak	Tüm seçenekler seçili
Yayın tarihi	Tüm seçenekler seçili

NOT

Bir kullanıcı kişisel giriş bilgilerini kullanarak oturum açtığında, yeni bir oturum başlatılır. Yeni bir oturum başlatıldığında, sistemin varsayılan filtre ayarları belirlenir. Bu, sistem tarafından verilen yanıtı etkiler.

6.4.2. Filtrelerin ayarlanması

Prof. Valmed, girilen sorguya verilecek yanıt için kullanılan veri tabanını belirleme seçeneği sunar. Prof. Valmed bu amaç için üç filtre kategorisi sunar:

Filtre kategorisi adı	Veri tabanı üzerindeki etkisi
Type	Sistem tarafından dikkate alınan veri türünü belirler, örn. Kılavuzlar veya ilaç bilgileri
Source	Sistem tarafından gözlemlenen veri kaynağını belirler, örn. Alman Nöroloji Derneği (DGN) veya Amerikan Nöroloji Akademisi (AAN)
Publication date	Sistem tarafından dikkate alınan veri kaynağının yayınlanma zaman aralığını belirler

Filter

▼ Type

▼ Source

▼ Publication Date

CLEAR ALL

Şekil 7 Filtre görünümü

Bir filtre kategorisinin filtreleri daraltılmış veya genişletilmiş olarak görüntülenebilir. Özel filtreler seçildiğinde, seçilen filtrelerin sayısı filtre kategorisi adının yanında mavi bir baloncuk içinde görüntülenir. Seçilen filtrelerin sayı gösterimi, filtre kategorisi daraltılmış olsa bile korunur.

Tür filtre kategorisindeki filtrelerin seçimi, Kaynak filtre kategorisi altındaki filtre seçim seçeneklerini etkiler. Kaynak filtre kategorisinde filtreler, Tür altındaki seçime göre gizlenir.

Filtrelerde gezinmek şu yollarla mümkündür:

- filtre kategorisini genişletmek ve **kaydırma çubuğunu** kullanmak veya
- **arama çubuğunu** kullanmak.

Arama çubuğu aracılığıyla gezinirken ilgili sonuçlar görüntülenir. Bu durumda diğer tüm filtreler gizlenir. **Arama çubuğu** üzerinden gezinmeyi sonlandırmak için ya görüntülenen bir filtreyi seçin ya da arama çubuğunu boşaltın.

Seçilen filtreler üzerlerine tekrar tıklanarak kaldırılabilir. Tüm filtre ayarlarını sıfırlamak için **CLEAR ALL** düğmesine basın.

NOT

Filtrelerin seçimi, sistem tarafından dikkate alınan veri tabanını sınırlar. Bu durum, sistemin kullanıcının sorgusuna verdiği yanıtı etkiler.

NOT

Prof. Valmed®'in yanıtları sınırlı sayıda tıbbi kılavuza dayanmaktadır. Prosedürlerde ve önerilerde farklı yetki alanlarında farklılıklar olabilir. Gerekirse filtreleri buna göre ayarlayın.

6.5 Sorgu geçmişi - History

Yürütülen sorgular, kullanıcıya bağlı Prof. Valmed® bulutunda kaydedilir. Kayıtlar kullanıcı tarafından Geçmiş bölümünde görülebilir. Kayıtlar zamana göre gruplandırılır: "Son 7 gün", "Geçen ay" ve "daha eski".

Yalnızca İstem sorguları için kullanıcı, kaydedilen sorguyu sistem yanıtıyla birlikte görüntülemek üzere Geçmiş'teki kayda tıklayabilir. Bu sorgunun yanıtı yeniden oluşturulmaz, kaydedilen yanıt görüntülenir.

UYARI

Sorgular kaydedildiğinde, ayarlanan filtreler de kaydedilir. Bu, sistem tarafından verilen yanıt etkiler. Daha fazla kullanımdan önce filtre ayarlarını buna göre değiştirin.

UYARI

Kaydedilen sorgular, kaydedildiği zamandaki veri tabanının durumuna dayanmaktadır. Veri tabanı bu arada değişmiş olabilir. Sistem yanıtları güncelliğini yitirmiş olabilir.

6.5.1. Geçmiş kayıtlarını silme

Geçmiş'te kaydedilen bireysel kayıtlar kullanıcı tarafından silinebilir. Bir kaydı silmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. İmleci silinecek geçmiş kaydının üzerine getirin - sistem delete icon (çöp kutusu) görüntüler.
2. **delete icona** tıklayın - sistem geçmiş kaydını silmek için onay ister (**Check mark (Onay işareti)**: Geçmiş kaydını sil veya **X**: İptal).
3. Silme işlemi onaylayın - geçmiş kaydı silinir.


6.6 Hesap ayarları

Account düğmesi Üst bilgi çubuğunda bulunur ve kullanıcı için çeşitli ayar seçenekleri ile bilgiler sağlar. Bu düğmeye tıklandığında aşağıdaki seçenekleri içeren bir pencere açılır:

- Açık ve Koyu Mod Arasında Geçiş Yapma: Kullanıcı uygulamanın arayüzünün açık ve koyu versiyonu arasında geçiş yapabilir.
- Geçmiş Görüntüle: Kullanıcı Geçmiş'i görüntüleyebilir.
- Yardım / Sıkça Sorulan Sorulara (SSS) Erişim: Kullanıcı yaygın soruların yanıtlarını ve sık karşılaşılan sorunların çözümlerini bulabilir. Ayrıca, daha fazla soru olması durumunda üreticinin iletişim bilgileri listelenir.
- Tıbbi cihaz etiketine erişim: Kullanıcı, cihaz UDI'si, üretici bilgileri ve CE işareti gibi bilgileri içeren Prof. Valmed® etiketini görüntüleyebilir.
- Kullanım Kılavuzuna (KK) erişim: Kullanıcı Prof. Valmed® için Kullanım Kılavuzuna doğrudan erişebilir.
- Kullanım koşullarına erişim: Kullanıcı Prof. Valmed®'in kullanım koşullarına doğrudan erişebilir.
- Diller arasında geçiş: Kullanıcı İngilizce ve Almanca arasında geçiş yapabilir.
- Çıkış Yap: Kullanıcı sistemden güvenli bir şekilde çıkış yapabilir.



Şekil 8 Hesap düğmesi

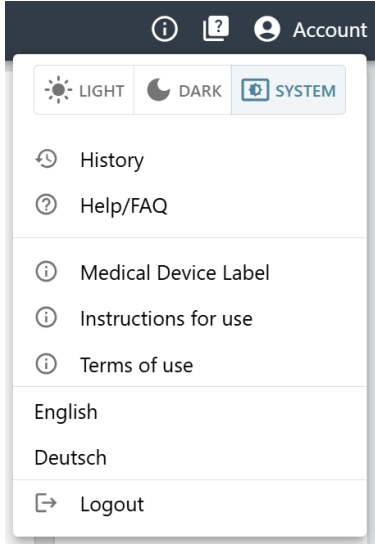

Şekil 9 Account düğmesine tıklandığında görüntülenen pencere

NOT

Kişisel giriş bilgilerinizi başkalarına vermeyin.

6.7 Etiket (Label)

Label düğmesi Üst bilgi çubuğunda bulunur. **Label** düğmesine tıklandığında, Prof. Valmed® ile ilgili etiketleme bilgilerini içeren bir pencere görüntülenecektir. Pencereyi kapatmak için **OK** seçeneğine basın.



Şekil 10 Label düğmesi

Etiket, ürünü tanımlamak için bilgiler ve ilgili ürün bilgilerini içerir, bunlar şunlardır:

- Ürün adı ve sürümü
- Tekil cihaz tanımlayıcısı (UDI)
- Parti numarası
- Üretim tarihi (belirli bir yazılım sürümünün yayınlanma tarihine karşılık gelir)
- Üretici adı ve iletişim bilgileri
- CE işareti ve ilgili Onaylanmış Kuruluş Numarası
- Geçerli sürümün bağlantısını da içeren, (elektronik) Kullanım Kılavuzuna başvurulmasına yönelik ipucu

6.7.1. Etiket üzerindeki semboller

Etiket üzerinde kullanılan sembolere genel bakış:

Sembol	Anlamı
	Üretici

Sembol	Anlamı
	Tekil cihaz tanımlayıcısı (UDI)
	Parti numarası
	Üretim tarihi
	(Elektronik) kullanım kılavuzuna başvurun
	Ürün bir tıbbi cihazdır (CE uygunluk değerlendirme prosedürü)

6.8 Veri tabanı değişikliklerine genel bakış

Information düğmesi *Üst bilgi çubuğunda* bulunur. **Information** düğmesine tıklandığında, Prof. Valmed® temel veri tabanındaki son değişikliklerin bir özetini içeren bir pencere görüntülenecektir. Pencereyi kapatmak için **OK** seçeneğine basın. The **Information** button is located in the *Header bar*.



Şekil 11 Information düğmesi

7 Sorun Giderme

7.1 Hata ekranı ve çözüm

Hata gösterimleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Bir hata gösterimi durumunda tablo, tetikleyici nedeni belirlemeye ve öngörülen düzeltici önlemlerle bunu ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Gösterim	Neden	Çözüm
Hata Ayrıntıları: Yeniden Dene	İşlem sırasında dahili bir hata oluştu. Bu durum, dahili olarak çağrılan hizmetlerle veya sorguyla ilgili olabilir.	Farklı bir sorgu deneyin veya 1-2 saniye bekleyip isteğinizi yeniden başlatın.
Giriş yaparken "Uups: bir şeyler çok ters gitti"	Veri tabanına nadiren de olsa henüz erişilemiyor veya veri tabanı halen uyku modunda.	1-2 saniye bekleyin ve tekrar deneyin.
Giriş yaparken hata	Kullanıcınız sistemde tanımlanamıyor.	profvalmed@profvalmed.com adresi üzerinden Prof. Valmed hizmetini kullanın.

Hesapla ilgili herhangi bir sorun olması durumunda, lütfen profvalmed@profvalmed.com adresinden Prof. Valmed® ile iletişime geçin.

7.2 Prof. Valmed® hesabına giriş yaparken yaşanan sorunlar

Prof. Valmed® erişiminiz bir Microsoft hesabı üzerinden yürütülmektedir. Giriş yaparken yaşanan sorunlar, Microsoft oturum açma ekranındaki "Hesabınıza erişemiyor musunuz?" düğmesi kullanılarak çözülebilir. Erişim sorununu çözmek için Microsoft ekranındaki talimatları izleyin.

Kullanıcının şifresini unutması durumunda, Microsoft oturum açma ekranındaki "Şifremi unuttum" düğmesine tıklanarak şifre sıfırlanabilir. Şifreyi sıfırlamak için Microsoft ekranındaki talimatları izleyin.

8 Bilgi Teknolojileri güvenliği

Kişisel verileriniz, MS Entra ID Hizmetlerinin yardımıyla son teknoloji yöntemlerle güvence altına alınmaktadır. Lütfen şifreleriniz için güvenli kombinasyonlar kullanın ve şirket erişimi söz konusu olduğunda, şirketinizin kendi BT yönetiminin talimatlarını izleyin.

DİKKAT

Kişisel giriş bilgilerinizi paylaşmayın. Tıbbi cihazın vasıfsız personel tarafından kullanılması riski mümkündür.

9 Bakım

9.1 Prof. Valmed®'in bakımı

Prof. Valmed®'in bakımı ve güncellemeleri üretici tarafından gerçekleştirilir.

Kullanıcı, Prof. Valmed®'in web tabanlı arayüzüne erişmek için kullanılan uç cihazda uygun bir tarayıcının (bkz. Bölüm 4 Sistem gereksinimleri) bulunmasını sağlamaktan sorumludur.

NOT

Prof. Valmed®'deki değişiklikler, sistem gereksinimleriyle ilgili değişikliklere yol açabilir. Gerekli sistem gereksinimleri için Kullanım Kılavuzunun güncel sürümüne başvurun.

9.2 Prof. Valmed® Veri Tabanı Güncellemeleri

Prof. Valmed® veri tabanı, en güncel ve doğru bilgileri içerdiğinden emin olmak için düzenli olarak güncellenir. Bununla birlikte, yeni bilgilerin yayınlanması ile bunların veri tabanına dahil edilmesi arasında bir zaman farkı olabilir.

Temel veri tabanına yönelik son değişikliklere ilişkin bilgilere kullanıcı tarafından **Information** düğmesi aracılığıyla erişilebilir (bkz. Bölüm 6.8 Veri tabanı değişikliklerine genel bakış).

UYARI

Prof. Valmed® temel veri tabanı düzenli olarak güncellenmektedir. Sistem yanıtları güncelliğini yitirmiş olabilir.

UYARI

Prof. Valmed® tarafından sağlanan bilgiler tıbbi konularda karar vermeyi desteklemeyi amaçlamaktadır ve teşhis veya tedavi kararları için tek dayanak olması amaçlanmamıştır. Hastayı riske atabilir.



Üretici:

Prof. Valmed® - validated medical information GmbH

Fasanenweg 2

63225 Langen

Almanya

profvalmed@profvalmed.com

www.profvalmed.com

Prof. Valmed® GmbH önceden haber vermeksizin tıbbi cihazda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Dağıtıcı:

OW SOLUTIONS SAĞLIK ÜRÜNLERİ VE ÇÖZÜMLERİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Topçular Mah. Maltepe Cad.,

Bina No: 4 /1, İç Kapı No: 18

Eyüpsultan/ İstanbul EYÜPSULTAN İSTANBUL

erkan.sen@ow-solutions.com

www.ow-solutions.com

NOT

Bu Kullanım Kılavuzunun basılı bir sürümü gerekiyorsa, lütfen profvalmed@profvalmed.com adresi üzerinden talep edin.

© Telif Hakkı 2025 by Prof. Valmed® - validated medical information GmbH, Langen, Almanya.

Yayın: 01.09.2026 tarihli Sürüm 2

İlk baskı tarihi: 2024-06-10

Prof. Valmed®

için uygulanabilir.

Yazılım sürümü 2.4

Basic-UDI-DI: 426245549PROFVALMED1KU